


Link do produktu: <https://www.annapapuga.pl/symbioral-interdental-0-6-1-2mm-mix-czyszcikow-miedzyzebowych-p-1111.html>

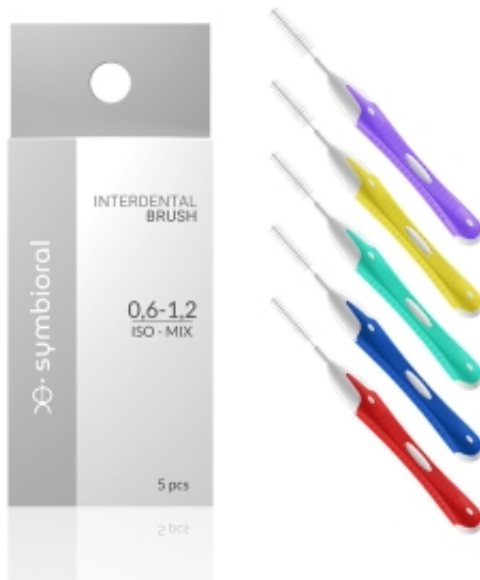

SYMBIORAL Interdental 0,6-1,2mm mix czyścików międzyzębowych

Cena	23,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5908239791261
Producent	SYMBIORAL

Opis produktu

SYMBIORAL INTERDENTAL BRUSH 0,6-1,2 / ISO - MIX

Zestaw 5 szczoteczek międzyzębowych o różnych średnicach - szare opakowanie.

Zestaw ten pozwala na indywidualne dobranie szczoteczek do swoich przestrzeni. Każda ze szczoteczek jest w innym kolorze, co odpowiada innej średnicy szczoteczki. Po wybraniu odpowiedniego rozmiaru wystarczy zakupić opakowanie 5 szt w kolorze odpowiadającym pasującej szczoteczce.

Szczoteczki międzyzębowe służą do czyszczenia szczelin pomiędzy zębami z resztek pokarmów i nieutwardzonej płytki bakteryjnej. od ciasnych przestrzeni międzyzębnych do szerokich.

Charakterystyka czyścików dentystycznych SYMBIORAL 0,6-1,2 / ISO - MIX:

- różnej grubości trzpień szczoteczek wykonany z importowanej niemieckiej stali nierdzewnej najwyższej jakości
- długość robocza trzpienia 12mm
- **włosie o rozstawie (średnicy) od 1,8mm do 4,5mm**
- przeznaczenie: do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych o różnej szerokości
- **układ włosów:**
 - cylinder - 0,6 i 0,7mm (grubość trzpienia)
 - stożek - 0,8, 1,0 i 12mm (grubość trzpienia)
- antypoślizgowy wygodny uchwyt z tworzywa PP + TPR
- skuwka na każdej szczoteczce - przezroczysta zatyczka może służyć jako przedłużenie uchwytu

Szczoteczki **SYMBIORAL INTERDENTAL BRUSH** zostały bardzo starannie wykonane. Do ich produkcji i pakowania użyto materiałów najwyższej jakości. Szczoteczki SYMBIORAL INTERDENTAL BRUSH wyróżniają się dłuższą żywotnością niż podobne produkty konkurencyjne.

Jak dobrać rozmiar szczoteczki międzyzębowej do przestrzeni międzyzębowych?

Każdą szczoteczkę charakteryzują dwa parametry - średnica trzpienia i średnica włókien. Są to parametry graniczne.

Kiedy trzpień będzie szerszy niż przestrzeń międzyzębowa - nie będziemy mieli możliwości wprowadzenia szczoteczki w przestrzeń międzyzębową. Dlatego należy wybrać szczoteczkę o trzpieniu węższym niż przestrzeń między zębami.

Uwaga: nie należy wciskać na siłę szczoteczki międzyzębowej w zbyt ciasne przestrzenie aby nie poranić dziąsła!

Średnica włókien szczoteczki powinna być mniejsza niż czyszczona szczelina między zębami.

Dzięki higienicznej zatyczce, możesz mieć szczoteczkę międzyzębową **SYMBIORAL INTERDENTAL BRUSH** zawsze przy sobie - w kieszeni lub torebce - zawsze pod ręką gdy jej potrzebujesz - w domowej łazience, w samochodzie, w biurze, w restauracji, w szkole.

Tabela rozmiarów SYMBIORAL INTERDENTAL BRUSH:

SIZE CHART		
Colour	Passage hole diameter (PHD)	German stainless steel wire/Bristle shape
	0,6 mm	0,38  1,8
	0,7 mm	0,43  2,2
	0,8 mm	0,47  2,5-3,0
	1,0 mm	0,47  3,0-3,5
	1,2 mm	0,50  3,5-4,5